

Gymna ShockMaster 500

TRATA EN LAS MEJORES CONDICIONES

Ficha técnica del producto

Comodidad en su uso en tratamientos

- Dos canales de salida para una mayor rapidez de uso de cabezales.



- Compresor de aceite que permite tratamientos silenciosos, sin vibraciones y fácil de utilizar.
- Cajón de cierre suave para almacenaje de cabezales y material.
- El cajón posee espacios especiales para colocar los cabezales.



- Posibilidad de actualizar a través del puerto USB.



Equipo siempre actualizado


La técnica de Ondas de choque evoluciona constantemente. Gracias a las actualizaciones del software, el usuario podrá beneficiarse de las últimas novedades en el mercado:

- **Sistema de Terapia Guiada patentado:** el sistema inteligente de terapia guiada de Ondas de choque adaptará automáticamente el nivel de tratamiento, basado en las condiciones de tu paciente.
- **Plan de terapia total:** cada aplicación está dividida en diferentes etapas: tratamiento del tendón, tratamiento con puntos gatillo, tratamiento muscular con D-Actor, tratamiento muscular con V-Actor.
- Los parámetros del tratamiento están adaptados en función de los últimos estudios.
- Inclusión de nuevos tratamientos y protocolos en el software.



Interfaz intuitivo


- **Fácil búsqueda de aplicaciones:** submenú basado en el tejido afectado.

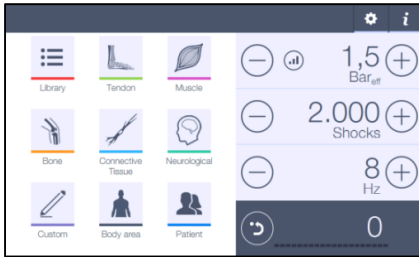

- **Función única de arranque suave** comienza en 1,0 bares hasta alcanzar la intensidad deseada para una mayor comodidad para paciente y el terapeuta.
- **Biblioteca anatómica única:** función, origen, inserción, inervación y vascularización de todos los músculos.
- **Visualización del área de tratamiento marcada con color.**



- Información médica sobre las indicaciones tratadas con ondas de choque.
- Visualización de la evolución de las sesiones del paciente a través del VAS (regla de dolor).

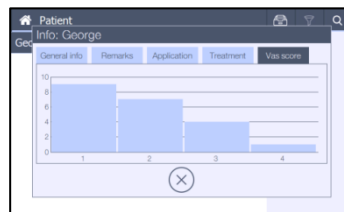

- **Restricción de seguridad:** previniendo el uso inapropiado.
- **Advertencia** después de 1.25 millones de disparos, cuando se necesita revisión del equipo.

NUEVA Pistola

- Diseño ergonómico: lightweight and well balanced.
- Materiales antideslizantes suaves.
- Rango de energía extendido: empezando a 0,3bar_{eff}.
- Más pacientes, más aplicaciones.
- Compatible con los nuevos aplicadores para fascia y columna.
- Compatibilidad con versiones anteriores: la pistola se puede usar en todos los dispositivos ShockMaster siempre que se realice la actualización de software obligatoria.



Set aplicadores de fascia



Set aplicadores para columna

Gymna Club

Suscripción gratuita: información extra sobre Ondas de choque con el modelo Gymna ShockMaster: bibliografía, soporte técnico, actualizaciones gratuitas de software, material de marketing extra...

Especificaciones técnicas

Características

Dimensiones (H x D x W cm)	102 x 58 x 57
Peso (kg)	65
Carrito integrado en el equipo	4 ruedas extragrandes de aluminio para mayor movilidad. Protecciones laterales para las ondas de choque.
Compressor	De aceite integrado en el carro, insonoro y sin vibración. 8 bares
Conexiones	2
Pantalla táctil	7" A color. 180°

Interfaz

Modo libre	Elige tus propios ajustes
Lista de indicaciones	43 indicaciones
Plan terapéutico	Toda indicación está dividida en diferentes pasos
Ajustes pre-programados	> 90 programas
Partes del cuerpo	Elección de indicaciones por partes del cuerpo
Área del cuerpo coloreada	Área del tratamiento coloreada en una imagen en la pantalla
Indicación del área de dolor referida por puntos gatillos	
Comienzo rápido	Aplicación para tendones Aplicación muscular Aplicación para huesos Aplicaciones conectivas Aplicaciones neurológicas Aplicaciones personalizadas
Base de datos de pacientes	Memoria para 2500 pacientes Escala visual analógica del dolor Visualización de la evolución del dolor del paciente en las sesiones
Backup	A través de puerto USB
Libro médico	Biblioteca anatómica (músculos, nervios y vascularización) Información sobre indicaciones Información sobre aplicadores Contraindicaciones
Contador preajustado	Visual a través de una barra luminosa
Comienzo suavizado	Subida de intensidad de forma gradual automática
Actualizaciones del software	Vía puerto USB

Performance

Rango de frecuencia	0,5 - 21 Hz (en saltos de 0,1 Hz)
Máx. frecuencia con V-Actor	35 Hz
Rango de presión	0,3 - 5 bar _{eff} (en saltos de 0.1 bar _{eff})

Pistola y aplicadores

Función on/off	Electrónico, no necesita sistema de enfriamiento
Peso (kg)	0,48 kg
Ergonómico	Protección de goma integrada
Terapia de vibración V-Actor	Available
Kit de revisión (standard)	4 revisiones

Aplicadores (standard)	Cambio de kit por el usuario Aplicador Beam
Aplicadores (opcional)	Aplicador D-Actor 20 mm Aplicador Deep Impact Aplicador 15mm Aplicador 6mm Aplicador D-Actor 35 mm Aplicador Focus lens

Material de marketing

Posters
Certificados

Apoyo

Gymna Club Bibliografía científica, soporte técnico, actualizaciones de software gratuitas, material de marketing, carta del doctor...

Información de pedido

<u>Artículo</u>	<u>Número de artículo</u>
Gymna ShockMaster 500	342.500

Standard incluido:

Equipo ShockMaster 500, Carrito ShockMaster 500, pistola RSW Handpiece Short, aplicador Beam, aplicador Deep Impact, aplicador 20mm D-Actor, set para 4 revisiones (2 balas y tubos dentro de la caja de la pistola + 1 kit de revisión HP Short), 1 protector antideslizante, 1 botella 500 ml gel de contacto, 1 caja de pañuelos, 1 poster, 1 certificado

Accesorios:

RSW Handpiece Short	342.716
Pack actualización SCM500	342.522
Handpiece short, set de reemplazo	342.749
Kit de revisión	309.771
Kit de revisión Handpiece Short	342.705
ShockMaster V-Actor II hand	338.239
Set aplicador fascia set (HP Short)	342.727
Set aplicador columna (HP Short)	342.738
Aplicador 15mm	338.613
Aplicador Beam	338.618
Aplicador Deep Impact	338.624
Focus Lens	338.630
Acupuncture 6 mm	338.602
D-ACTOR 20mm S	338.646
D-ACTOR 35mm S	338.657
Contacto 500 ml	341.088
Contacto 5 L	341.099
Protector antideslizante	338.217
V-ACTOR 25mm	338.668
V-ACTOR 40mm	338.679
ShockMaster Poster	338.382
ShockMaster 500 Trolley	338.960